


⚠ 事前に取り付け可能かご確認ください 取り付けには住宅の改修が必要です。
施工業者とご相談ください。


① トイレ内の取り付けスペースをご確認ください。 ② 取り付ける壁面の構造をご確認ください。

●左壁取り付け用の場合(右壁も同様です) ※単位 mm

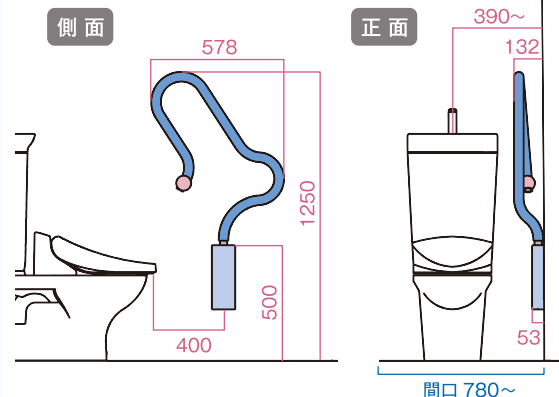

③ 製品をお選びください。

便器に座った時、ドアの位置は何処にありますか？

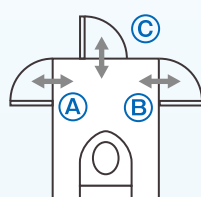


- ① 左壁取り付け用 (TRT-0101L)
- ② 右壁取り付け用 (TRT-0101R)
- ③ どちらの壁にも取り付け可能です

注1 取り付ける壁に付帯設備等がある場合は、施工業者とご相談ください。
注2 取り付け位置は使用者の体形、体力に合わせ調整してください。

●介護保険(居宅介護住宅改修費)をご利用の場合は、ケアマネージャーと相談の上、施工業者からの見積もりが必要です。
※個人で取り付けされる場合は、介護保険対象外です。

ラ・クリップトイレ用の取り付け方法 ※取り付けは施工業者にご依頼ください

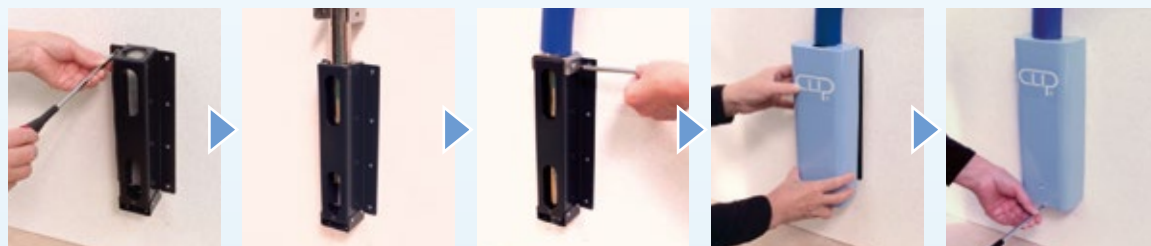

- ① 鋼板ベースをネジで壁に取り付けます
- ② ポールを上から差し込みます
- ③ 左右をネジで固定します
- ④ 化粧カバーを被せます
- ⑤ 底部をネジで留めます

製造元

株式会社 東海技研工業

<https://keibi-group.com/>

TEL 0573-65-6888 FAX 0573-65-0162

〒508-0001 岐阜県中津川市中津川 932-325

販売元

株式会社 ハッソー

お客様窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-68-8210

受付時間 平日 9時~17時

お問い合わせメールアドレス smat@k-hasso.co.jp



<https://keibi-group.com/ra-clip/>

記載内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。

⚠ 本製品の取り扱いに際しては、製品に同梱の「取扱説明書」の内容を必ず読み、よく理解してからご使用ください。

Copyright© 2021 TOKAIGIKEN KOGYO CORPORATION. All rights reserved.

202308-2000

—自立を助ける介助ポール—

ラ・クリップ®

トイレ用


トイレでの動作を追求したら、
このカタチ。

CLIP

Rising Aid® Activities of Daily Living & Quality of Life

TOKAIGIKEN CO.,LTD

「ラ・クリップ」は弊社の登録商標です。

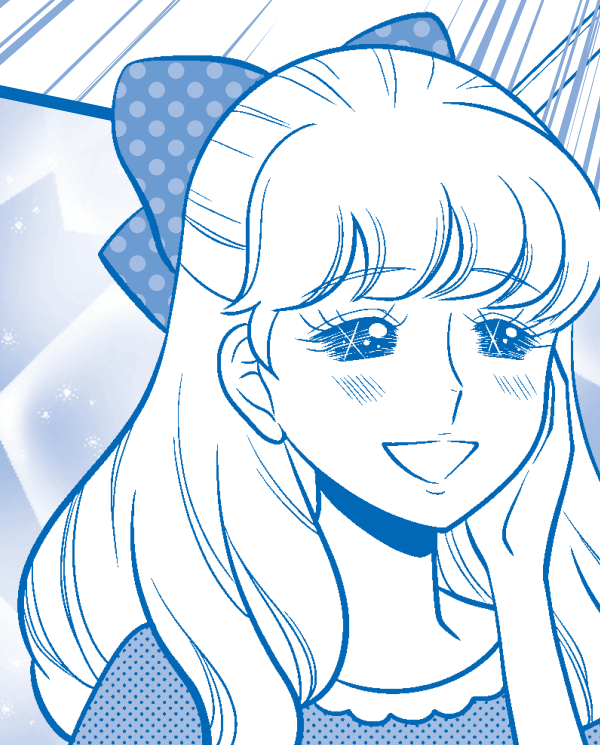

できることは自分で。 その思いをしっかり支えます。

従来とは真逆の手すりを“引く”という画期的な発想から生まれた「ラ・クリップ」。ベッド用の経験と技術を活かし、トイレでの動作・介助に特化した新シリーズが誕生しました。
トイレでの動作を支えるこの介助ポールがあれば、使う人、介助する人、どちらの負担も軽減され、自立への一歩が踏み出せます。



どこでも掴みやすい三次元構造

ポールは両手で掴みやすい曲線に。力がしっかり加わり体が安定するため、立位保持もラクに行えます。

安全な設計

一筆書きのシンプル構造は、安心かつ安全なスタイルです。

カバー(発泡ゴム)
ポール(ステンレス製)

グリップボール

滑らない、冷たくない 発泡ゴムカバー

ステンレス製ポールを発泡ゴムで被覆。どこを握っても滑りにくく、冷たくありません。

右壁取り付け用と 左壁取り付け用を ご用意

室内の状態に合わせて選べます。
※写真は左壁取り付け用



化粧カバー
(内側に銅板ベース)

※写真は右壁取り付け用


ラ・クリップ
トイレ用の動作を
動画でチェック!



製品仕様

品名	左壁取り付け用	右壁取り付け用
型名	TRT-0101L	TRT-0101R
取付位置	便座から見て左側に取付け	便座から見て右側に取付け
総重量	5kg	
サイズ	高さ1003×幅578×奥行132	
ボール	ステンレスパイプφ32 発泡ゴムカバー(φ40)	
銅板ベース	銅板塗装仕上げ	
化粧カバー	銅板塗装仕上げ(高さ278×幅100×奥行53)	
グリップボール	エラストマー樹脂 1個	

外観図

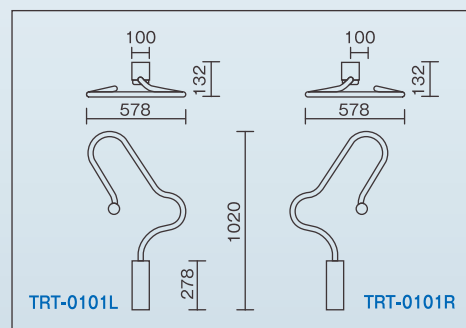


ラ・クリップトイレ用の機能分析をしていただきました!



中部学院大学短期大学部
社会福祉学科 教授
中部学院大学大学院
人間福祉学研究科 兼任教員
横山 さつき 教授

「ラ・クリップトイレ用」、「L型手すり」、「波型手すり」を使用して排泄動作をする時の重心変動を、重心動揺計を用いて測定しました。

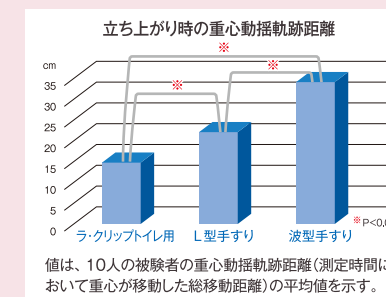

「ラ・クリップトイレ用」を使用すると、他の手すりを使用した時よりも、1.2～1.5倍安定した起立動作や立位保持ができることが確認されました。
「ラ・クリップトイレ用」は、従来の手すりに比べ、介護の必要な方の「持てる力」を効率よく引き出し、**安全・安楽なトイレでの排泄をサポートします!!**

Step 1 立ち上がり



車椅子を入口に付け、足を床に降ろしてポールをつかみ、引いて立ち上がります。どこをつかんでも大丈夫。

**引き寄せやすいから
自力で立てる!**


Step 2 立位保持



ポールに抱きついたり、つかまることで安定した姿勢を保ちながら着衣を下げることができます。介助者は軽介助で支え、着衣を下げることができます。

介助もしやすい!

Step 3 着座

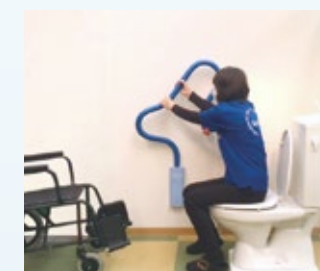

ゆっくりとポールを伝い便座に座ります。持ち替えたり手を離すことなく、着座動作ができます。

**少ない動作で
着座できる!**

Step 4 立ち上がり



終了後はポールを引いて立ち上がります。ポールを写真のようにつかむことで、少ない力で立てます。

少ない力で立てる!

Step 5 立位保持



安定した姿勢でポールを抱きかかえ、着衣を直します。ポールをつかんでいれば方向転換も安心してできます。

体が安定します!

Step 6 移乗動作



ポールを伝い、ゆっくり車椅子に座ります。介助者は軽介助で動作を支えることができます。

**自分でできて
前向きな気持ちに!**

※動作説明は右壁取り付け用です。